



Sistema EMG Ultium™

Guía de Inicio Rápido

Bienvenido de parte de Noraxon

¡Felicidades por adquirir tu nuevo Sistema EMG Ultium!

Esta guía te proporcionará instrucciones paso a paso sobre cómo instalar tu nuevo hardware y software, ajustar la configuración del dispositivo y grabar tu primer conjunto de datos.

Comencemos por explicar cómo instalar tu nuevo hardware.

Nota: Esto no pretende ser un manual completo, sino una guía para ayudarte a comenzar con tu sistema. Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo operar el Sistema EMG Ultium y sus funciones, consulta el Manual **completo del Usuario Ultium (P-8808)**, también incluido con tu sistema.

1 Desembalaje del Sistema

El Sistema Ultium está empaquetado dentro de una caja reforzada acolchada para su almacenamiento y protección durante el transporte. Al llegar, retira cuidadosamente todo el contenido y verifica que los siguientes componentes estén presentes.



Figura 1 - Receptor Ultium (número de parte 880)

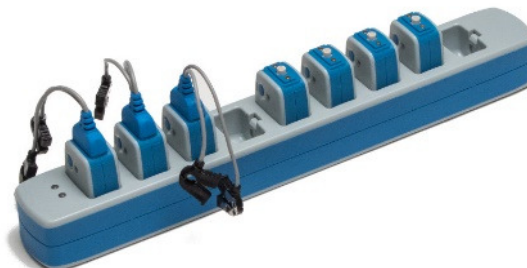


Figura 2 - Estación de Acoplamiento de Sensores EMG (número de parte 883)



Figura 3 - Sensor EMG (número de parte 810)



Figura 4 - Smart Lead EMG Ultium (número de parte 842)

Guía de Inicio Rápido de EMG Ultium



Figura 6 - Cable USB A a B (número de parte CBL2)



Figura 5 - Fuente de Alimentación del Cargador de Sensores EMG (número de parte PSU1)



Figura 8 - Cable de la Estación de Acoplamiento de Sensores al Receptor Ultium (número de parte CBL34)

Tu sistema puede diferir dependiendo del número de sensores incluidos en tu envío, las cantidades de sensores EMG, Smart Leads EMG, estaciones de acoplamiento de sensores y cables de estación de acoplamiento.

Los elementos adicionales que pueden incluirse con tu Sistema Ultium son:


- Muestras de cinta adhesiva de doble cara (número de parte 842C)
- Electrodo de muestra (generalmente electrodos dobles, número de parte 272)
- Manual del Usuario Ultium (número de parte P-8808)

2 Instalación del Hardware

Paso 1


Inserta el extremo USB-B (más pequeño) del cable USB (CBL2) en el conector USB en la parte trasera del Receptor Ultium (880).

Inserta el extremo opuesto del cable USB en un puerto USB disponible en la computadora.

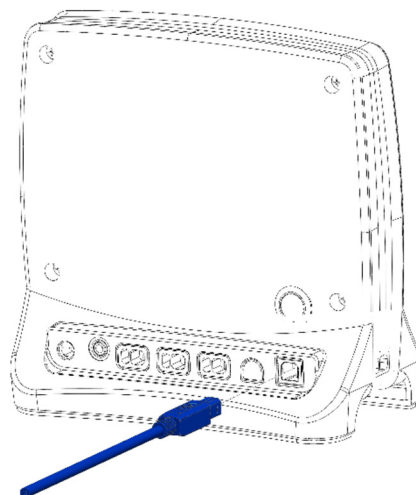


Paso 2

Inserta un Smart Lead EMG (842) en cada sonda EMG (810).

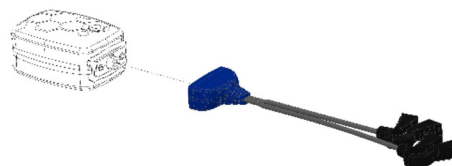

Paso 3


Inserta las sondas EMG en la Estación de Acoplamiento de Sensores (883).

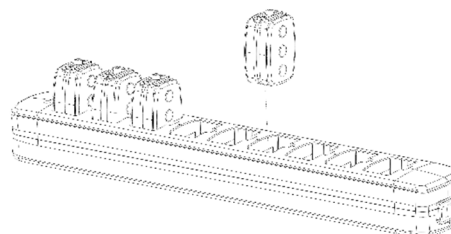

Paso 4


Guía de Inicio Rápido de EMG Ultium

Inserta el conector de barril de la fuente de alimentación (PSU1) en el conector del Receptor Ultium.

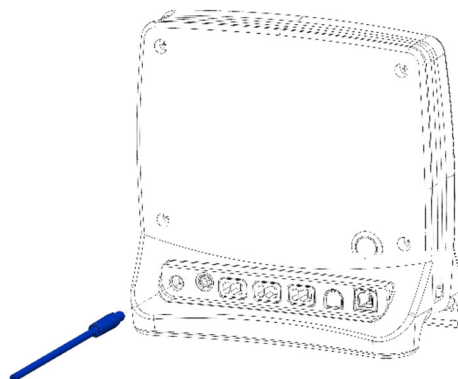

Paso 5

Conecta el Receptor a la Estación de Acoplamiento de Sensores (883). Esto cargará los sensores.

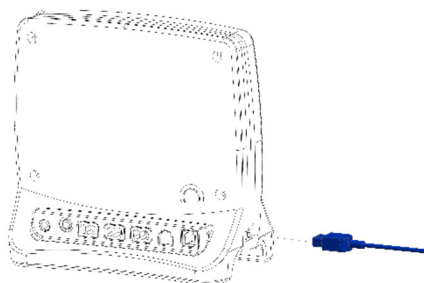

3 Instalación del Software Complementario - myoResearch™ 3

Para utilizar la funcionalidad completa del sistema EMG Ultium y asegurarte de que el sistema tenga controladores actualizados, es necesario instalar myoResearch 3 (MR3) de Noraxon en la computadora.

Nota: El Receptor Ultium requiere el controlador de dispositivo USB de Noraxon que está preinstalado por la instalación del software MR3. También está disponible en la [Sección de Descargas](#) del sitio web de Noraxon.

3.1 Instalación del Software



Dentro del paquete en el que se envió el Sistema Ultium, hay una unidad flash USB que contiene el último software *myoResearch 3*.

1. Inserta la unidad flash USB MR3 en la PC.
2. Un menú aparecerá automáticamente.
3. Haz clic en el archivo de instalación de Noraxon y sigue las instrucciones del asistente.
4. Después de la instalación, se creará un icono en el escritorio.

3.2 Activación del Software Complementario

El software complementario instalado debe activarse antes de que sea posible su uso sin restricciones.

1. Abre MR3.
2. Aparecerá un cuadro de diálogo que indicará cuántas veces más se puede abrir MR3.
3. Haz clic en "Activar".
4. Ingresa el ID de licencia proporcionado en tu unidad flash USB y presiona "OK".
5. Si tienes conexión a Internet, haz clic en "Activar por Internet" para activarlo de inmediato.
6. Alternativamente, envía por correo electrónico el ID de activación proporcionado a activation@Noraxon.com
7. El Soporte de Noraxon responderá por correo electrónico o por teléfono con el Código de Activación.
8. Ingresa el Código de Activación proporcionado para eliminar cualquier restricción de uso.

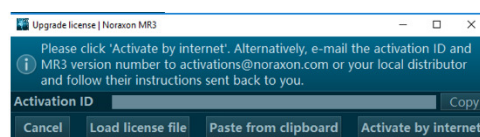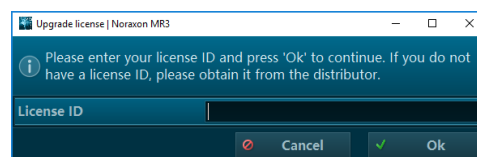


4 Configuración del Hardware

Antes de que el sistema Ultium pueda ser utilizado, la configuración del software del dispositivo debe ser configurada para reconocer los diferentes componentes que componen el sistema. Sigue las instrucciones a continuación para actualizar el firmware del receptor, el firmware del sensor y poblar los sensores para preparar una recolección de datos.

Paso 1

Abre MR3, generalmente listado bajo Noraxon
-> MR3


Haz clic en el botón de **Configuración de Hardware** en la esquina superior derecha.

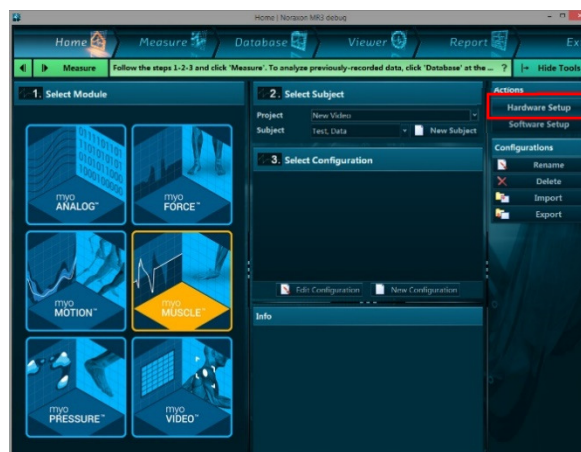

Paso 2

Selecciona el icono de Ultium, dentro de la columna 'Nuevo Dispositivo', y haz clic en el botón **Insertar**.

Nota: Asegúrate de que el Receptor esté conectado al puerto USB de la computadora mediante el Cable USB (CBL2).

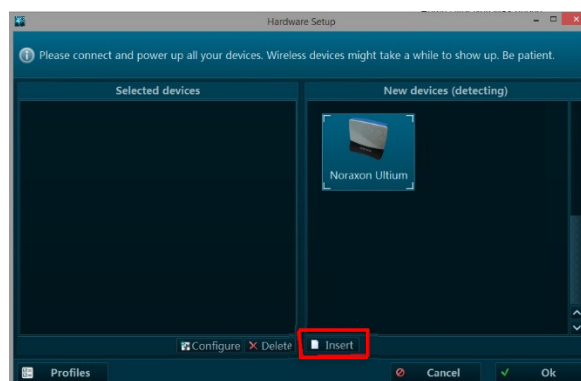


Paso 3

Aparecerá el cuadro de diálogo Configuración de Ultium.

Dentro de la '**Pestaña General**', selecciona la Tasa de Muestreo de Colección deseada.

Si estás usando MyoSync, marca la casilla Usar Noraxon MyoSync (consulta el Manual del Usuario EMG Ultium para obtener más información).

Nota: Las actualizaciones de firmware para el Receptor se indicarán aquí, si son necesarias.

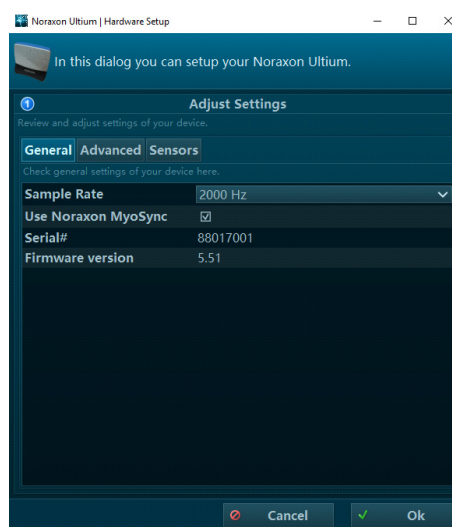


Guía de Inicio Rápido de EMG Ultium

Paso 4

Haz clic en la Pestaña Avanzado.

Selecciona una Red RF de la lista de Redes RF. En la mayoría de los casos, el valor predeterminado "1" funcionará. Sin embargo, si estás usando múltiples sistemas Ultium, deben estar en redes separadas.

También puedes configurar los cortes de filtro EMG aquí.

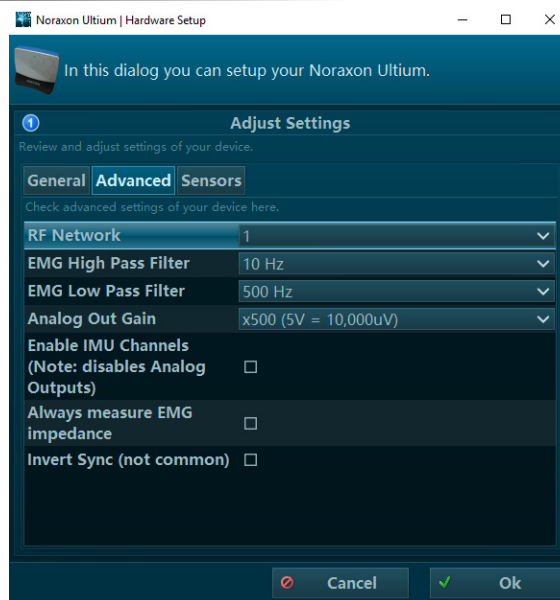


Paso 5

Haz clic en la Pestaña Sensores.


Coloca todos los Sensores Ultium en los cargadores y adjunta los cargadores al Receptor Ultium. Si tienes algún Smart Lead que no sea EMG, adjúntalos a cualquier sensor EMG.

Haz clic en Detectar Sensores en el Cargador para cargar todos los números de serie en el software MR3.

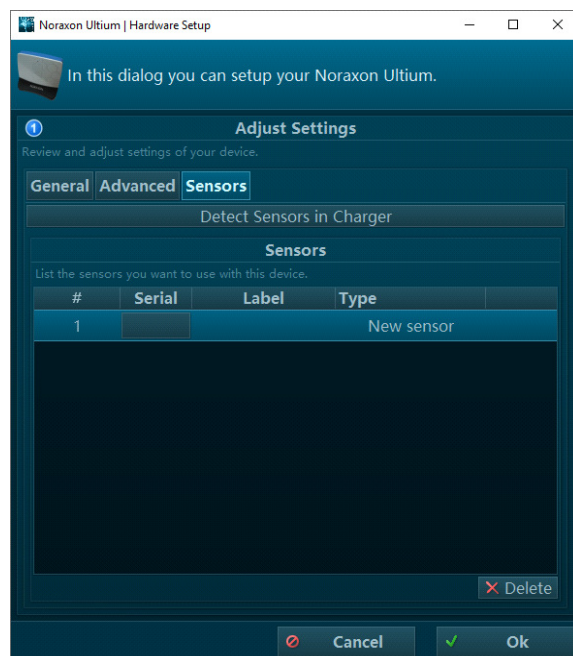

Paso 6

Después de que la detección esté completa, haz clic en Sí para reemplazar todos los números de serie de sensor existentes asociados con este dispositivo.

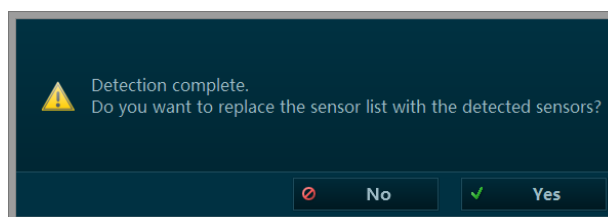


Guía de Inicio Rápido de EMG Ultium

Paso 6

Haz clic en **Aceptar** (en la parte inferior de la ventana de diálogo) cuando hayas terminado.

Nota: Los números de serie de los sensores aparecen en el orden en que se colocan en el documento de carga, comenzando por el extremo con los LED (opuesto al puerto de carga).

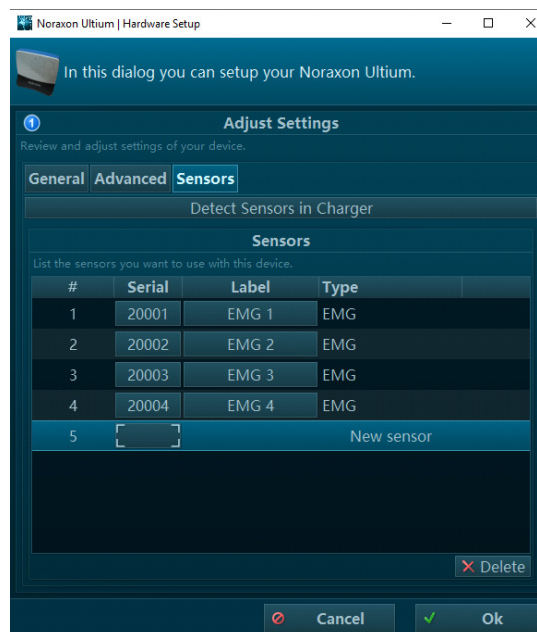

4.1 Configuración usando Smart Leads Ultium


Si solo estás utilizando los Smart Leads sEMG, continúa con la Sección 5: Grabación de una Medición.

Asegúrate de que el Smart Lead esté conectado al sensor Ultium antes de elegir Detectar Sensores en el Cargador. El LED del sensor Ultium parpadeará de color morado cuando un Smart Lead esté conectado y de naranja cuando el Smart Lead esté desconectado.

Si el software no reconoce el Smart Lead, es posible que los sensores requieran una actualización de firmware. Sigue las instrucciones para las actualizaciones de firmware del dispositivo.

El Smart Lead aparecerá utilizando el número de serie del Smart Lead, y no del sensor Ultium.

Haz clic en **Aceptar** (en la parte inferior de la ventana de diálogo) cuando hayas terminado.

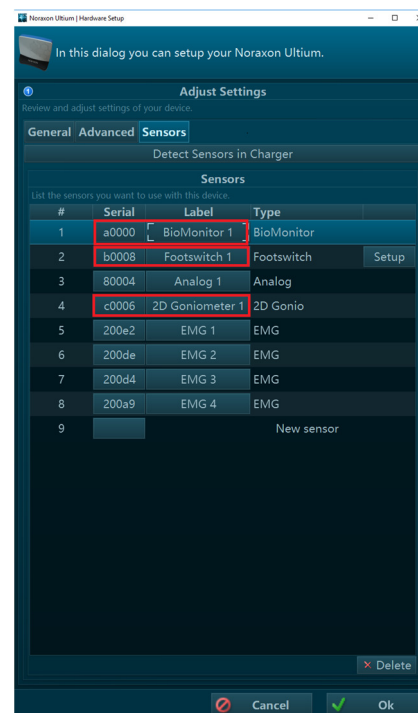


5 Grabación de una Medición

Paso 1

Dentro de la pantalla de inicio, haz clic en el ícono del módulo myoMUSCLE.

Crea un Nuevo Sujeto


Selecciona **Nueva Configuración**.

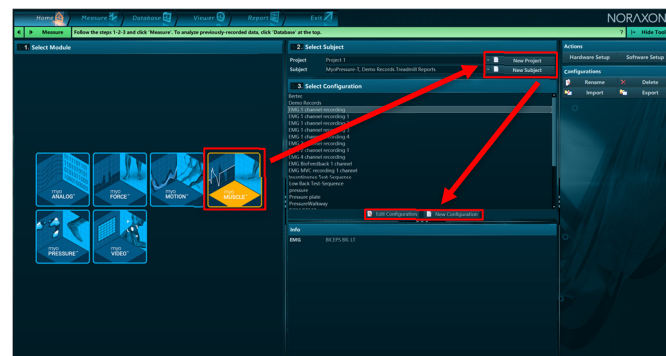

Paso 2

Inserta los dispositivos que se utilizarán para la medición en la configuración arrastrando un dispositivo desde la lista de **Dispositivos disponibles**.

Utiliza la lista de sensores para seleccionar o deseleccionar el número de sensores que se utilizarán dentro de la configuración. Mientras el sensor esté seleccionado, asigna un nombre al canal seleccionando el músculo correspondiente en el **Mapa Muscular 3D** o ingresando el nombre manualmente.

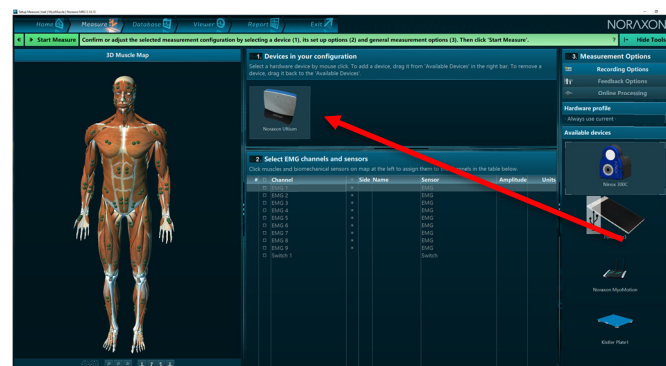

Continúa al siguiente paso seleccionando **Medir**.

Paso 3

Después de verificar la visualización de la señal normal, estás listo para grabar una medición. Selecciona **Grabar** en la parte superior izquierda de la pantalla y comienza tu protocolo.

Después de completar tu grabación, selecciona **Detener** y **Guardar**. Guarda la grabación con el nombre de tu configuración o escribe un nombre nuevo. Después de esto, guarda tu grabación o **Descarta** y mide nuevamente.



6 Visualización de un Registro

Para ver un registro previamente grabado, selecciona la pestaña de **Base de Datos**. Los registros están organizados por **Proyecto** y nombre de **Sujeto**. Haz doble clic en el registro de interés para abrirlo en la pestaña del **Visualizador**.

7 Otras Características de Uso de MR3

Hay muchas características adicionales integradas dentro de MR3, tales como:

- Grabaciones multiactividad
- Visualizaciones de biofeedback en vivo
- Procesamiento de señal en línea y postmedición
- Informes personalizados
- Exportación (e importación) de datos

Para aprender más sobre las características disponibles para ti a través del (de los) sistema(s) que has adquirido, consulta el Manual del Usuario de MyoResearch y el Manual del Usuario de Hardware correspondiente para este dispositivo. Si por alguna razón encuentras que nuestro contenido de soporte es insuficiente para tus necesidades, por favor comunícate directamente con nuestro equipo de soporte enviando una solicitud de soporte en nuestro sitio web.